


Domus 1

Superficie Especial de Manejo de Presión




El Domus 1 es la SEMP Wellell recomendada tanto para pacientes con riesgo bajo de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado I.

Prevención UPPs

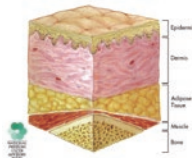

Riesgo bajo

Tratamiento UPPs

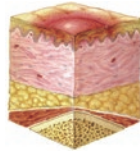

Grado I

El Domus 1 cuenta con una terapia de presión alternante (las burbujas se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la base.

Eficacia terapéutica:



Alivio de Presión: Básico. Gracias a sus 130 burbujas de 6,4 cm de altura.



Regulador en función del peso del paciente: Desde 40 a 100 kg.



PVC sanitario: Minimiza el riesgo de alergias y aporta mayor durabilidad.

Descripción de Producto	Referencia
Domus 1	0101017N

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	30,3 x 17 x 20 cm. 4,15 kg
--	----------------------------

Especificaciones del colchón	
Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	198 x 86 x 6,4 cm . 2 kg
Burbujas	130 burbujas de PVC sanitario
Solapas de ajuste al somier	1 metro de solapas
Certificados	Retardante al fuego CA 117
Garantía	6 meses

Especificaciones del compresor	
Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	23,7 x 11,2 x 9,5 cm. 1,4 kg
Voltaje	AC 230V, 50 Hz
Máxima salida de aire	4 litros/minuto
Ajuste de rango de presión	Sí, según peso paciente (40-100 kg)
Duración del ciclo alternante	9,6 minutos
Terapia	Alternante
Nivel sonoro	36 dBA
Botón encendido y apagado. Colgadores	Sí
Carcasa	ABS retardante al fuego
Certificados	Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21
Garantía	2 años

Apex - Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



APEX
Wellell Group

Wellell