


Domus S

Superficie Especial de Manejo de Presión



El Domus S es la SEMP Wellell recomendada tanto para pacientes con riesgo bajo de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado I.

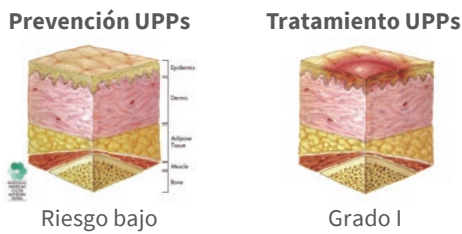

El Domus S cuenta con una terapia de presión alternante (las celdas se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la base y cuenta con 16 celdas de 12,5 cm de altura conforme a las últimas recomendaciones de la EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).


Eficacia terapéutica:



Alivio de Presión: Básico. Gracias a sus 16 celdas alternantes de 12,5 cm de altura. Área de alivio de presión en la zona de los talones.



Celdas alternantes: De 12,5 cm conforme a las recomendaciones de la EPUAP.

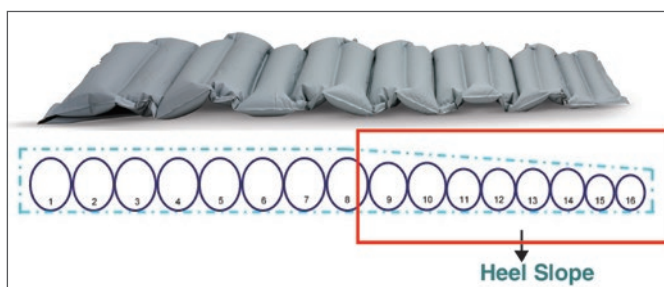

Área de alivio de presión en los talones: La inclinación de las celdas es decreciente en las últimas 8 celdas para un mejor alivio de presión.

Apex - Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



APEX
Wellell Group

Wellell

| Descripción de producto | Referencia |
|--|--|
| Domus S | 0101020N |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso | 32 x 23,5 x 36,5. 4,7 kg |
| Especificaciones del colchón | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso | 200 x 85 x 12,5 - 9 cm . 3,1 kg |
| Celdas | 16 celdas de PVC sanitario de 12,5 cm |
| Solapas de ajuste al somier | Sí |
| Certificados | Retardante al fuego CA 117 |
| Garantía | 6 meses |
| Especificaciones del compresor | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso | 23,7 x 11,2 x 9,5 cm. 1,4 kg |
| Voltaje | AC 230V, 50 Hz |
| Máxima salida de aire | 4 litros/minuto |
| Ajuste de rango de presión | Sí, según peso paciente (40-120 kg) |
| Duración del ciclo alternante | 9,6 minutos |
| Terapia | Alternante |
| Nivel sonoro | 36 dBA |
| Botón encendido y apagado. Colgadores | Sí |
| Carcasa | ABS retardante al fuego |
| Certificados | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 |
| Garantía | 2 años |