

Concentrador Estacionario

Oxigenoterapia




Wellell

Concentrador Estacionario

Concentrador Estacionario de Oxígeno

El concentrador estacionario de flujo continuo de Wellell es idóneo para pacientes que necesitan una oxigenoterapia de alto nivel en su domicilio. Estudios clínicos han documentado que los concentradores de oxígeno son terapéuticamente equivalentes a otros tipos de sistemas de suministro de oxígeno.

Este dispositivo separa el oxígeno del aire ambiente proporcionando una elevada concentración de oxígeno de hasta 95,5% y un flujo de hasta 5 l/ min. A través de una gafa nasal, proporciona al paciente la cantidad de oxígeno deseada.

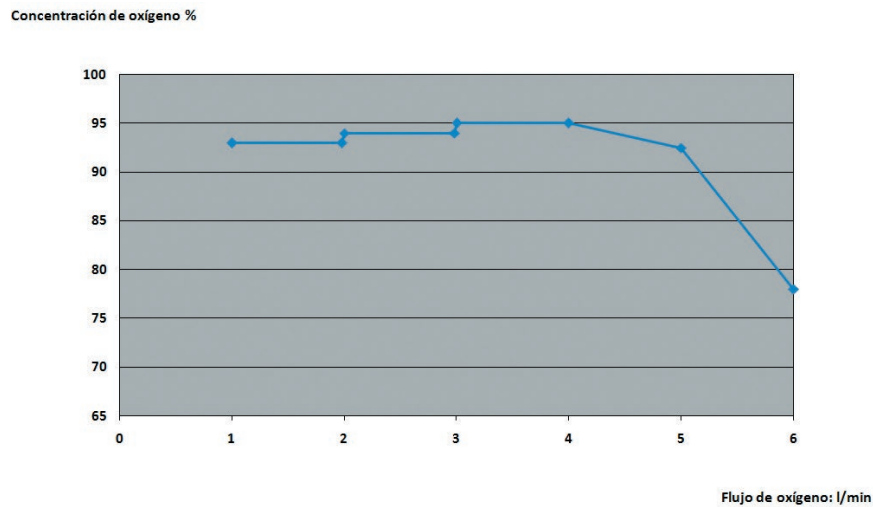

El concentrador de oxígeno continuo de Wellell es compacto con 39 x 24,5 x 50 cm. Incorpora ruedas para poder transportarlo y guardarlo cómodamente.

Cuenta con diversas alarmas que advierten al paciente de diferentes situaciones: fallo eléctrico, sobrecalentamiento del equipo, baja concentración de O₂... entre otros. Su temporizador con apagado automático permite ajustar el tiempo de uso. Para una mayor seguridad del paciente, posee una válvula de alivio de presión del compresor.

Para un seguimiento completo de la terapia dispone de una pantalla digital que muestra el tiempo de uso actual y acumulativo.

Además cuenta con su mando a distancia que proporciona un cómodo manejo del equipo.

Se suministra con un filtro de repuesto.

Elementos destacados:



Descripción de producto	Referencia
Concentrador Estacionario	0208050
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	47,5 x 33 x 59 cm
Peso total de la caja	17 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	39 x 24,5 x 50 cm
Peso	15 kg
Modo de funcionamiento	Flujo continuo
Flujo máx.	5L/ min
Rango de flujo	0~5L/min en continuo
Cambio flujo máx. con presión de aspiración de 7kPa	<0,5L/min
Concentración de oxígeno	93% ± 3% y 95,5% ~ 87%
Presión de salida	20 ~ 50 kPa y 40 ~ 70 kPa
Nivel de sonido	Promedio 48dB parte delantera y 52dB unidad completa
Tiempo operativo mínimo	30 Minutos
Garantía	Concentrador 2 años

Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell