

Salva Escaleras Yack

Movilidad Eléctrica



Wellell




Salva Escaleras Yack

El Yack es el salva escaleras que permite subir y bajar escaleras rectas y de caracol. Se va adaptando a las necesidades del paciente, pasando del modo asiento (Yack 971) al modo silla de ruedas (Yack 972 / 973). Desmontable en diferentes secciones para facilitar su traslado. Con batería desmontable que permite su recarga sin mover todo el equipo.



Batería desmontable para facilitar la recarga.

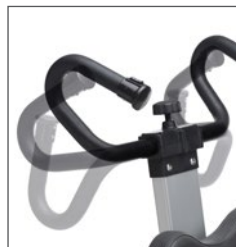

Timón regulable en altura y ajustable para adaptarlo al cuidador.



Nuevo panel de control digital que permite introducir al cuidador diversos parámetros (velocidad, modo de subir las escaleras: individualmente/ciclo continuado...) garantizando un uso seguro y simple del sube escaleras.



Desmontable en diferentes secciones: mástil, columna y asiento (según modelo), lo que facilita su transporte.



En el Yack 971 los reposabrazos y reposapiés son abatibles para mayor confort del usuario.

Yack 971

El Yack 971 que incluye asiento, es el salva escaleras idóneo en una primera etapa. Cómodo, gracias sus reposabrazos abatibles y los reposapiés y reposacabezas regulables en altura.



Yack 972

La Yack 972 es la salva escalera para sillas de ruedas que permiten subir y bajar escaleras rectas y de caracol. Para un mejor ajuste de la silla de ruedas, cuenta con una barra de ajuste que permite fijar la silla al timón.



Yack 973

La Yack 973 es la salva escaleras para sillas de ruedas que permite subir y bajar escaleras rectas y de caracol. Permite adaptarlo a cualquier silla de ruedas, incluso a las pediátricas.

A diferencia de los equipos anteriores, el usuario puede transportar el salva escaleras Yack 973 en su propia silla de ruedas.



Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Yack 971	04090029N	123 x 62 x 50 cm	51 kg
Yack 972	04090030N	123 x 62 x 50 cm	48 kg
Yack 973	04090031N	123 x 62 x 50 cm	40 kg

Descripción de accesorios	Yack 971	Yack 972	Yack 973
Barra ajustable 46 – 60 cm	-	04090053	04090053
Barra ajustable 28 – 38 cm	-	04090018	04090018

Especificaciones técnicas	Yack 971	Yack 972	Yack 973
Profundidad (reposapiés cerrado)	57 cm	41 cm	34 cm
Profundidad (reposapiés abierto)	76 cm	76 cm	-
Largura	51 cm	53 - 70 cm	33 cm
Altura	118 - 160 cm	118 - 160 cm	118 - 160 cm
Peso con baterías	44 kg	41,5 kg	35,2 kg
Peso máximo soportado	130 kg	130 kg	130 kg
Peso timón	7,5 kg	7,5 kg	7,5 kg
Peso de la base	22,5 kg	22,5 kg	22,5 kg
Peso de las baterías	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
Tipo motor	220W – 24V	220W – 24V	220W – 24V
Altura máxima de escalón	21 cm	21 cm	21 cm
Anchura mínima del escalón	80 cm	90 cm	90 cm (dependiendo de la silla de ruedas)
Espacio mínimo de maniobra	70 x 70 cm	80 x 80 cm	80 x 80 cm (depende de la anchura de la silla de ruedas)
Velocidad	12 escalones/min.	12 escalones/min.	12 escalones/min.
Autonomía	500 escalones	500 escalones	500 escalones
Autonomía en reserva	20 escalones	20 escalones	20 escalones
Certificados	Marcado CE, REACH, RoHS		

Garantía			
Yack	2 años	2 años	2 años
Baterías	6 meses	6 meses	6 meses

Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell

Accesorios



Barra ajustable para el Yack 972 y Yack 973.