

I-Transformer Lite

Movilidad Eléctrica



Wellect

Plegado:

1.



2.



3.



I-Transformer Lite

Movilidad Eléctrica

La scooter I-Transformer Lite es la nueva scooter plegable de Welbell. Su sistema de plegado manual permite que la scooter quede de pie, evitando así que el usuario se agache.

Ligera: Gracias a su batería de litio y su chasis de magnesio, su peso total es de tan solo 20,5 kg.

Cómoda: Con sistema de amortiguación trasera regulable. Sus reposabrazos ajustables en altura y anchura permiten adaptar la scooter al usuario.


Segura: Con ruedas antivuelco que garantizan la seguridad del usuario. Incorpora una luz frontal LED que permite ver y ser visto.

Fácil de transportar: Sus 4 ruedas permiten moverla como un trolley una vez plegada.

Elementos destacados:



Bolsillo trasero

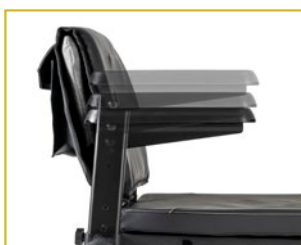

Reposabrazos ajustables en altura y anchura




Amortiguación trasera



Manillar ergonómico



Luz LED delantera

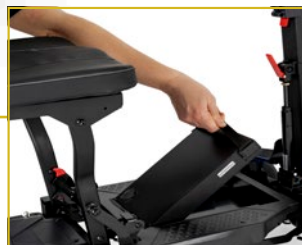

Batería extraíble para facilitar su carga

Accesorios:



Luz delantera



Luz trasera



Linterna



Cargador USB



Mochila



Bolsa lateral



Maletín



Cesta delantera plegable



Bolsa de transporte



Medidas en cm

Descripción de producto	Referencia
I-Transformer Lite	0407009
Descripción de accesorios	
Luz delantera	04060727
Luz trasera	04060728
Linterna	04060473
Cargador USB	04060771
Mochila	04061909
Bolsa lateral	04061561
Cesta delantera	04061963
Bolsa de transporte	04061962
Maletín	04062059

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	41 x 48 x 73 cm
Peso total de la caja	24 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto)	97 x 47 x 83 – 97 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	42 x 47 x 72 cm
Peso máximo recomendado	110 kg
Peso con batería	20,5 kg
Peso sin batería	19 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	3°
Radio de giro	140 cm
Tipo de motor	150W 24 V
Ruedas delanteras	7" Macizas
Ruedas traseras	7" Macizas
Batería	De litio 10,4 Ah 25,9 V 1 unidad
Cargador	29,4V 2A
Certificados	Fabricados según estándares ISO 9001, Mercado CE, REACH y RoHS

Garantía	
Equipo	2 años
Batería	6 meses

Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell