

Pro-care Auto Bariatric

Superficie Especial de Manejo de Presión





Pro-care Auto Bariatric





Superficie Especial de Manejo de Presión

El Pro-care Auto Bariatric es la SEMP Wellell recomendada para uso bariátrico. Cubre prácticamente todo tipo de situaciones en el campo de las UPPs: desde pacientes con riesgo de aparición de úlceras por presión (de bajo a muy alto), hasta aquellos que ya se encuentran bajo tratamiento (con UPPs desde grado I hasta grado IV).

Prevención UPPs



Tratamiento UPPs

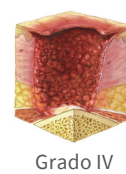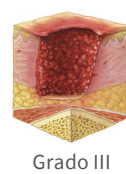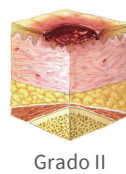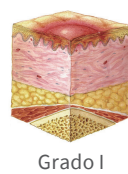

El Pro-care Auto Bariatric es un colchón de reemplazo con tres tipos de terapia:



Terapia de presión alternante: las celdas individuales se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 10, 15, 20 o 25 minutos.




Terapia de baja presión alternante: las celdas individuales se inflan y desinflan a una presión más baja en comparación con la terapia de presión alternante. Proporcionando así una liberación de presión periódica y evitar una presión prolongada en el paciente.





Terapia de baja presión continua: provoca la inmersión del paciente en la superficie, al reducir 2/3 la presión.

Para un mayor confort, este equipo permite ajustar el nivel de presión a gusto del paciente . Dispone de 4 alarmas visuales y sonoras silenciables que indican fallo eléctrico , avería , baja presión y alta presión. Después de 20 minutos, vuelve a la función anteriormente determinada. Para una mayor seguridad, es posible bloquear el panel de control .

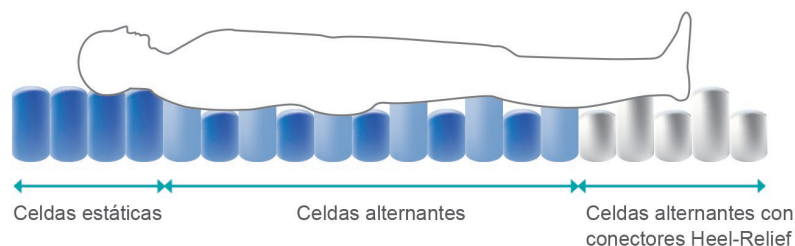




Celdas Qubicell™ ultra resistentes cell in cell: Celdas patentadas Wellell fabricadas en Nylon TPU para reducir la fricción y con forma rectangular para una mejor redistribución de la presión. Máxima eficacia terapéutica, gracias a la altura de sus 20 celdas (20,32 cm). Tecnología celda dentro celda que favorece la inmersión y protege al paciente en caso de fallo eléctrico.

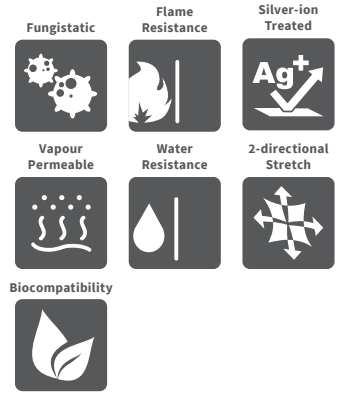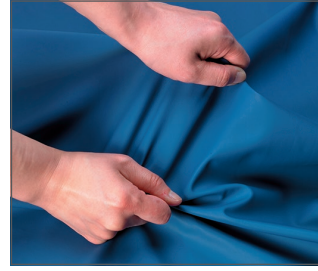

Funda: Con tratamiento antibacteriano de Ión Plata (Ag+); Permeable al vapor, resistente al agua, retardante al fuego y con tratamiento antibacteriano MRSA. Cremallera bidireccional.

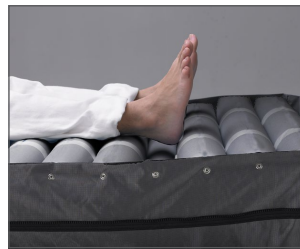


Tecnología Heel Relief: Eliminan por completo la presión ejercida sobre los talones al cancelar la celda correspondiente.



CPR: Visible y de fácil uso que facilita la reanimación en caso de parada cardiorespiratoria. Permite un rápido desinflado en caso de emergencia.



Filtro antibacteriano externo: Reducen el riesgo de contaminación y ayudan a mantener el equipo en óptimas condiciones de uso.

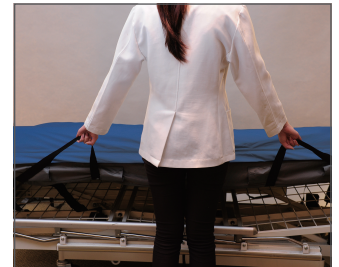

Modo transporte y almacenaje: Conector Wellell que impide la salida del aire durante los traslados. Cinchas para almacenar el colchón.

Eficacia terapéutica:



Alivio de Presión: Muy alto. Las celdas Qubicell™ con forma rectangular redistribuyen óptimamente la presión. Dispone de dos terapias (alternante y estática) y un mayor número y altura de celdas (20 celdas de 20,32 cm de altura) que favorecen la inmersión.



Gestión del Microclima: Muy alta. Su funda es resistente al agua y permeable al vapor.



Reducción de la Fricción: Muy alta. La funda se adapta al cuerpo del paciente reduciendo la fricción. La funda ha superado los tests de irritación y sensibilidad a la piel.



Seguridad del paciente: Muy alta. Incorpora 4 alarmas y es posible bloquear el panel de control. Las celdas internas, protegen al paciente en caso de fallo eléctrico. CPR profesional. La funda ha superado el test de citotoxicidad.




Peso máximo soportado: 450 kg.

Descripción de producto	Referencia
Pro-care Auto Bariatric	0103043-107 0103043-122

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	63 x 57 x 63 cm
Peso total de la caja	18 kg

Especificaciones del colchón	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	200 x 107/122 x 20 cm
Peso	10 kg
Celdas	20 celdas independiente de Nylon TPU de 20,32 cm
Zona estática en la cabeza	3 celdas
Celdas Heel-Relief	5 celdas
Base	Nylon PU
CPR	Sí. Profesional
Guía para cable	Sí
Cinchas de ajuste al somier	Sí
Muelles de seguridad internos	Sí
Funda protectora del tubo externo	Sí
Modo almacenaje y transporte	Sí
Certificados	Retardante al fuego
Garantía	2 años

Especificaciones de la funda	
Material	Poliéster/PU elástico en 4 direcciones
Cierre	Cremallera bi-direccional
Resistente al agua	Sí
Permeable al vapor	Sí
Bio-compatibilidad	ISO 10993-5 & 10993-10
Protocolo de limpieza	
Certificaciones	REACH&RoHS y Bs 7175 Crib 7

Especificaciones del compresor	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	34 x 13,5 x 20,5 cm
Peso	3,8 kg
Voltaje	AC 220-240V, 50 Hz
Máxima salida de aire	8 litros/minuto x 2
Ajuste de rango de presión	Sí, según peso paciente (40-450 kg)
Duración del ciclo alternante	10, 15, 20 o 25 minutos
Terapias	Alternante, Baja Presión Alternante y Baja Presión Continua
Funciones	Bloqueo de panel presionando 3 segundos (bloqueo automático si en 5 minutos no hay actividad) y silenciar alarma (Después de 3 minutos la alarma por baja presión se vuelve a activar)
Alarma	4 (baja presión, alta presión, fallo eléctrico y avería)
Nivel sonoro	20 dBA
Botón encendido y apagado	Sí
Modo transporte	Sí
Colgadores	Sí
Carcasa	ABS retardante al fuego
Filtro y fusible	Sí, externos
Certificados	Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP41
Garantía	2 años

Apex - Wellell Group
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell