

# I-Brio Plus

Movilidad Eléctrica



Plegado fácil en 3 pasos:

1.



2.



3.



# I-Brio Plus

## Movilidad Eléctrica

La I-Brio Plus es la Scooter que puede plegarse en un instante presionando el pedal rojo. Destaca por incluir reposabrazos, luz delantera y ruedas neumáticas grandes.

Gracias a sus reducidas dimensiones, 96 x 53 x 87-100 cm (sin apoyabrazos), podrás llevarla a donde quieras.

- **Cómoda:** Los reposabrazos son regulables en altura y anchura y pueden abatirse facilitando el acceso al usuario. Cuenta con ruedas neumáticas (20x5 cm las delanteras y 23x6,5 cm las traseras) que aportan un mayor confort de marcha y permiten subir con mayor facilidad los bordillos.
- **Compacta:** Solo mide 96 cm desplegada y 50 cm plegada. Gira en tan solo 90 cm.
- **Segura:** Con ruedas antivuelco (laterales y traseras) que garantizan la seguridad del usuario y con llave de seguridad en la batería. Incorpora una luz frontal LED que permite ver y ser visto.
- **Fácil de transportar:** Con asiento extraíble para facilitar su transporte. Sus 4 ruedas permiten moverla como un trolley una vez plegada.
- **Ligera:** Gracias a su batería de litio, su peso total es de 34 kg.



## Elementos destacados:



Manillar ergonómico



Reposabrazos abatibles y regulables en altura y anchura



Batería de litio extraíble para facilitar su carga



Palanca de desembrague y ruedas antivuelco. Luz trasera



Luz LED delantera



Presionar el pedal para el plegado /desplegado




Desmontable en 3 piezas

## Accesorios:



Bolsa transporte

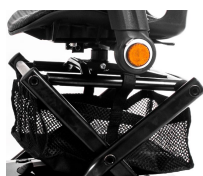

Cesta inferior



Cesta delantera



Portabastones Smart



Portabastones giratorio



Cargador USB



Sujeta vasos



Mochila



Medidas en cm

Descripción de producto	Referencia
I-Brio Plus	0401037A PLUS
Descripción de accesorios	
Bolsa de transporte	04060639
Cesta inferior	04060673
Cesta delantera	04061138
Portabastones Smart	04061135
Portabastones giratorio	04061151
Cargador USB	04060771
Sujeta vasos	04061456
Mochila	04061564

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	46 x 51 x 88 cm
Peso total de la caja	34 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	96 x 53 x 87-100 cm
Dimensiones con apoyabrazos	96 x 55,5-58 x 87-100 cm
Peso máximo soportado	115 kg
Peso con baterías	34 kg
Peso sin baterías	31 kg
Velocidad máxima	6,5 km/h
Pendiente máxima	<100 kg hasta 5° >100 kg hasta 3°
Radio de giro	90 cm
Tipo de motor	270 W, Motor 4 polos
Ruedas delanteras	20 x 5 cm. Neumáticas
Ruedas traseras	23 x 6,5 cm. Neumáticas
Baterías	De litio 25.2V 10,05 Ah x 1 unidad
Cargador	2 A, externo, 110/240 Volt.
Certificados	Marcado CE, REACH, RoHS

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año

**Apex - Wellell Group**  
 Elcano 9, 6ª planta  
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
 T +34 94 4706408  
 info@wellell.com



**APEX**  
 Wellell Group

**Wellell**