

# Oruga Sherpa

Movilidad Eléctrica



# Oruga Sherpa

La Sherpa es la oruga salva escaleras que ayuda a los usuarios de las sillas de ruedas a subir y/o bajar escaleras rectas. Seguro, gracias a que la liberación y el control de seguridad están situados en el manillar. La pestaña curvada patentada, permite un agarre más firme. La batería de 24V garantiza una mayor duración.



Transportable en secciones.



Nuevo panel de control digital que permite introducir al cuidador diversos parámetros (velocidad, modo de subir las escaleras -individualmente/ciclo continuado...) garantizando un uso seguro y simple del sube escaleras.



Pestaña curvada que proporciona un agarre más firme de la silla de ruedas a la oruga.



Reposacabezas ajustable en altura.





Dispositivo manual en caso de quedarse sin batería.



Apoyaruedas abatibles.

## Sherpa 955 / 956 / 957

La Sherpa 955 es el modelo básico de oruga capaz de transportar 130 kg de peso. A diferencia de la 955, la Sherpa 956 permite una mayor capacidad de transporte (150 kg). El modelo Sherpa 957 incorpora el «Wheel System». Gracias a sus 2 ruedas motorizadas puede girar sobre sí misma 360°.

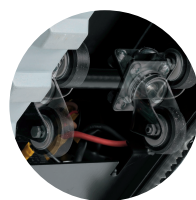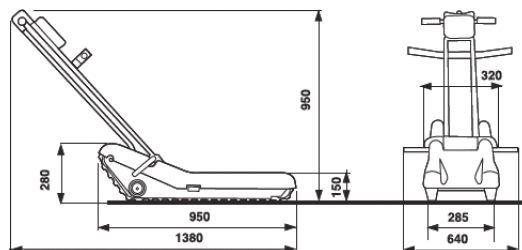


**Wheel**system

Solo 957

## Sherpa 958

La Sherpa 958 aporta un mayor confort gracias al timón eléctrico que facilita la basculación del usuario evitando sobre esfuerzos en el cuidador (Tiller System). Este modelo también incorpora el «Wheel System», que permite girar sobre sí misma 360° gracias a sus 2 ruedas motorizadas.

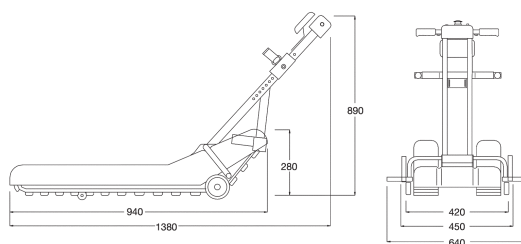

**Wheel**system **Tiller**system

| Descripción de producto | Referencia | Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | Peso total de la caja |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Sherpa 955              | 04090032   | 114 x 70 x 50 cm                              | 62 kg                 |
| Sherpa 956              | 04090033   | 114 x 70 x 50 cm                              | 65 kg                 |
| Sherpa 957              | 04090034   | 114 x 70 x 50 cm                              | 62 kg                 |
| Sherpa 958              | 04090035   | 114 x 70 x 50 cm                              | 62 kg                 |

| Especificaciones técnicas             | Sherpa 955/956                                | Sherpa 957                                                          | Sherpa 958                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (largo x ancho x alto)    | 94 x 45 cm                                    | 94 x 45 cm                                                          | 94 x 45 cm                                                          |
| Peso con baterías                     | 51,5 kg / 52 kg                               | 53 kg                                                               | 54,5 kg                                                             |
| Peso máximo soportado                 | 130 kg / 150 kg                               | 130 kg                                                              | 130 kg                                                              |
| Peso timón                            | 10,5 kg                                       | 10,5 kg                                                             | 12 kg                                                               |
| Basculación del timón                 | Manual                                        | Manual                                                              | Eléctrico                                                           |
| Tipo motor                            | 220W – 24V (925 rpm) / 180W – 24V (2500 rpm)  | 220W – 24V (925 rpm)                                                | 220W – 24V (925 rpm)                                                |
| Altura máxima de escalón              | 23 cm                                         | 23 cm                                                               | 23 cm                                                               |
| Anchura mínima del escalón            | 80 cm                                         | 80 cm                                                               | 80 cm                                                               |
| Espacio mínimo de maniobra            | 97 x 97 cm                                    | 95 x 97 cm                                                          | 89 x 95 cm                                                          |
| Velocidad                             | 5,5 m/min                                     | 5,5 m/min                                                           | 5,5 m/min                                                           |
| Autonomía                             | 45 pisos / 35 pisos                           | 40 pisos                                                            | 40 pisos                                                            |
| Autonomía en reserva                  | 5 pisos / 3 pisos                             | 4 pisos                                                             | 4 pisos                                                             |
| Inclinación máxima                    | 35°                                           | 35°                                                                 | 35°                                                                 |
| Cargador                              | 110-230V                                      | 110-230V                                                            | 110-230V                                                            |
| Botón bloqueo en el timón             | Sí                                            | Sí                                                                  | Sí                                                                  |
| Soporte inferior para silla de ruedas | Plegable                                      | Plegable                                                            | Plegable                                                            |
| Movimiento sobre el suelo             | Sistema manual con 4 ruedas auto-balanceables | Sistema manual con 4 ruedas auto-balanceables y 2 ruedas giratorias | Sistema manual con 4 ruedas auto-balanceables y 2 ruedas giratorias |
| Certificados                          | Marcado CE, REACH, RoHS                       |                                                                     |                                                                     |

| Garantía                 |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Sherpa                   | 2 años  | 2 años  | 2 años  |
| Baterías                 | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
| Componentes electrónicos | 1 año   | 1 año   | 1 año   |



Barra ajustable para modelos Sherpa.

**Apex – Wellell Group**  
 Elcano 9, 6ª planta  
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
 T +34 94 4706408  
 info@wellell.com

